

## DeRoyal Air Ankle Stirrup

Single Patient Use Only

Rx Only • Latex Safe

### SIZING

	Height	Product Number
Standard	10"	AB2360-00
Small	8.5"	AB2361-00
Pediatric	6"	AB2362-00

### IMPORTANT INFORMATION

Please read all instructions, warnings and precautions before use. Correct application is essential to proper functioning of product.

### INDICATIONS

Acute ankle sprains and strains, chronic instabilities and prophylactic use.

### PRECAUTIONS


- This product is to be fitted by a physician (or properly licensed practitioner) who is familiar with the purpose for which they are responsible. The physician or practitioner is responsible for providing wearing instructions and precautions to other healthcare practitioners or healthcare providers involved in the patient's care and the patient.
- Consult your physician (or properly licensed practitioner) immediately if you experience sensation changes, unusual reactions, swelling

or prolonged pain while using this product.

- Follow the instructions of your physician (or properly licensed practitioner) for length and duration of use.

### DIRECTIONS FOR USE


- Spread the shells and place the patient's heel on the heel strap (located between the shells). **NOTE:** Before application place an absorbent sock or ankle wrap on patient's ankle.

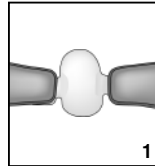


- Place the shells against the sides of the ankle.



- Compress the shells around the patient's ankle, while securing straps from bottom to top.

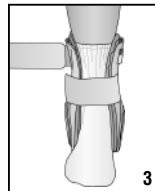

**NOTE:** To adjust heel strap for a snug fit, raise or lower the heel straps located on the outer side of the shells.

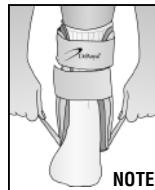


- Firmly insert clear end of inflation bulb into valve and inflate bladder per physician's order by squeezing the bulb until desired compression is achieved. **NOTE:** The pediatric ankle brace air cells are pre-inflated and do not require adjustment.



- Check for adequate circulation. Readjust air amount and straps as needed for a secure and comfortable fit.

- Insert patient's foot into lace-up shoe (unless otherwise instructed).

**NOTE:** To deflate air bladder, firmly insert black end of inflation bulb into valve and deflate bladder per physician's order by squeezing the bulb.

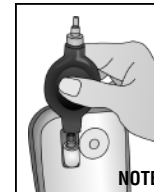

### WASHING INSTRUCTIONS


Wipe down ankle brace with a damp cloth and air dry.



#### Manufacturer

DeRoyal  
200 DeBusk Lane, Powell, TN 37849 U.S.A.  
888.938.7828  
865.938.7828

**MediRoyal Nordic AB**  
Staffans väg 6 B,  
S-192 07 Sollentuna  
SWEDEN  
+46 8 506 766 00  
[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

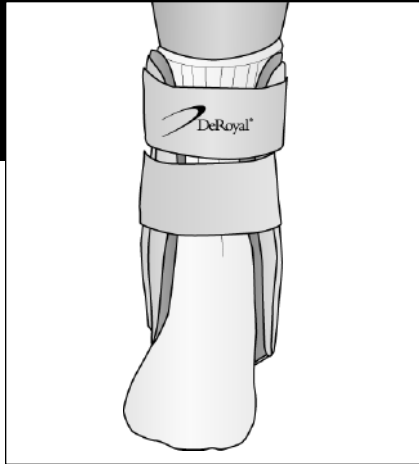

## Estribo de aire DeRoyal para el tobillo

Úsese exclusivamente con un paciente

Solamente para terapia • Seguro contra látex

### TAMAÑO

	Altura	Número del producto
Estándar	25 cm (10")	AB2360-00
Pequeño	21.25 cm (8.5")	AB2361-00
Pediátrico	15 cm (6")	AB2362-00

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por favor, lea todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de usar. Es fundamental colocar el producto correctamente para que funcione de modo adecuado.

### INDICACIONES

Distensiones musculares y esguinces agudos de tobillo, inestabilidades crónicas y uso profiláctico.


### PRECAUCIONES

- Este producto debe ser colocado por un médico (o un trabajador de la salud debidamente autorizado) que esté familiarizado con el propósito para el cual es responsable. El médico o trabajador de la salud tiene la responsabilidad de ofrecer instrucciones sobre cómo usar el producto y precauciones a otros profesionales médicos implicados en el cuidado del paciente y al propio paciente.
- Consulte inmediatamente con su médico (o trabajador de la salud debidamente autorizado) si presenta cambios de sensación, reacciones inusuales, tumefacción o dolor prolongado mientras está usando este producto.

- Siga las instrucciones de su médico (o trabajador de la salud debidamente autorizado) sobre el período y la duración de uso.

### INSTRUCCIONES DE USO


- Extienda las partes laterales y coloque el talón del paciente en la correa del talón (situada entre las partes laterales). **NOTA:** Antes de colocarlo ponga un calcetín absorbente o venda en el tobillo del paciente.

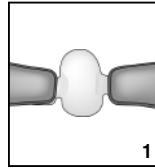


- Coloque las partes laterales contra los laterales del tobillo.



- Comprima las partes laterales alrededor del tobillo del paciente mientras asegura las correas de abajo hacia arriba.

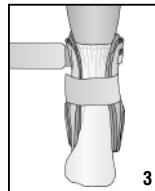

- NOTA:** Para conseguir un buen ajuste en la correa del talón, suba o baje las correas del talón situadas en el lateral externo de las partes laterales.

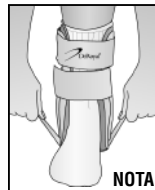

- Inserte firmemente el extremo transparente de la perilla de inflado en la



válvula e infle la cámara por orden del médico apretando la perilla de inflado hasta lograr la compresión deseada. **NOTA:** Las células de aire de la tobillera pediátrica están preinfladas y no es necesario ajustarla.



- Revise que la circulación es adecuada. Reajuste la cantidad de aire y las correas según sea necesario para conseguir un ajuste seguro y cómodo.
- Inserte el pie del paciente en el zapato atado (a menos que se indique lo contrario).

**NOTA:** Para desinflar la cámara de aire, inserte firmemente en la válvula el extremo negro de la perilla de inflado y desinfe la cámara de aire por orden del médico apretando la perilla de inflado.



### INSTRUCCIONES DE LAVADO

Limpie la tobillera con un trapo húmedo y séquela al aire.



Fabricante  
DeRoyal  
200 DeBusk Lane, Powell, TN 37849 EE.UU.  
888.938.7828  
865.938.7828

**MediRoyal Nordic AB**  
Staffans väg 6 B,  
S-192 07 Sollentuna  
SWEDEN  
+46 8 506 766 00  
[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)