

# Genum Liga ROM Ease Long

Ny ROM-skena i rostfri stållegering. Extensionsbegränsning 0, 10, 20 och 30 grader. Flexionsbegränsning 60, 75 och 90 grader. Möjlighet till totalimmobilisering i 0, 20, 40 och 60 grader. Ny förbättrad skenficka som totalt kapslar in ROM-leden. Quad-Strap förhindrar att ortosen åker ner.

## Genum Liga ROM Ease Long NeoTex Genum Liga ROM Ease Long TriTex


En vidareutveckling av modellerna EU4010/ EU4110. Modellen är helt öppningsbar framtill för att förenkla applicering vid exempelvis post-operativt bruk. Leden är tillverkad av en rostfri stållegering vilket gör den helt underhållsfri och helt korrosionsbeständig. Möjligheten till rörelseinskränknings i extension 0, 10, 20, 30 grader och flexion 60, 75, 90 grader har kompletterats med möjlighet till immobilisering i 0, 20, 40 och 60 grader. Detta gör att ortosen passar för begränsade post-op behov. Ledjusteringen görs med en pin som sedan förankras med ett plastlock. Skenfickan har förbättrats för att den nya skenan ska vara helt inkapslad för optimal komfort och funktion. Öppningen för skenan sitter baktill på den övre delen av fickan. Det gör att den sitter säkert under aktivitet men enkelt kan tas ur vid behov. Ortosen har fyra halvcirkulära band som appliceras individuellt för stöd vilket ger en mycket bra stabilitet. Justerbara kardborrband upptill och nedtill på ortosen. **INDIKATIONER** Post-Operativt efter knäoperation, ACL eller PCL skador, kollateralligamentsskador, meniskskador.



EU4019 GENUM LIGA ROM EASE LONG NEOTEX  
EU4119 GENUM LIGA ROM EASE LONG TRITEX

**SMALL** 32-35 centimeter  
**MEDIUM** 35-38 centimeter  
**LARGE** 38-42 centimeter

**X-LARGE** 42-46 centimeter  
**XX-LARGE** 46-50 centimeter

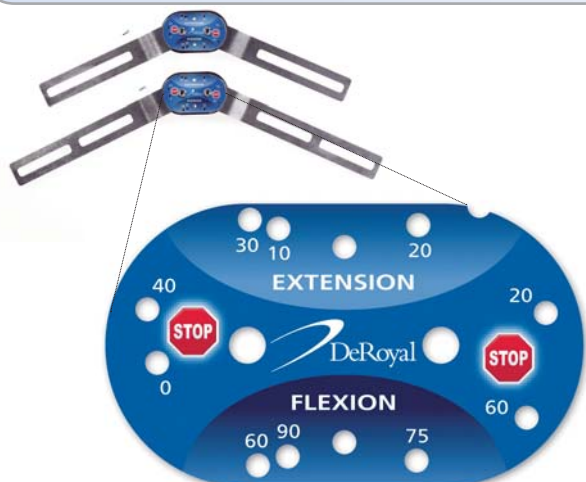

  
**DeRoyal**<sup>®</sup>  
  
**mediroyal**

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden  
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna  
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90  
[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se) [info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)