

Genum Liga ROM Long

Ny ROM-skena i rostfri stållegering. Extensionsbegränsning 0, 10, 20 och 30 grader. Flexionsbegränsning 60, 75 och 90 grader. Möjlighet till totalimmobilisering i 0, 20, 40 och 60 grader. Ny förbättrad skenficka som totalt kapslar in ROM-leden. Quad-Strap förhindrar att ortosen åker ner.




EU4010 GENUM LIGA ROM LONG NEOTEX
EU4110 GENUM LIGA ROM LONG TRITEX

Genum Liga ROM Long NeoTex Genum Liga ROM Long TriTex

Modell 4010/4110 har vidareutvecklats efter synpunkter från kunder. Leden är tillverkad av en rostfri stållegering vilket gör den helt underhållsfri och helt korrosionsbeständig. Möjligheten till rörelseinskränkningen i extension och flexion kompletterats med möjlighet till immobilisering i 0, 20, 40 och 60 grader. Detta gör att ortosen passar för begränsade post-op behov. Ledjusteringen görs med en pin som sedan förankras med ett plastlock. Skenfickan har förbättrats för att den nya skenan ska vara helt inkapslad för optimal komfort och funktion. Öppningen för skenan sitter baktill på den övre delen av fickan. Det gör att den sitter säkert under aktivitet men enkelt kan tas ur vid behov. Ortosen har fyra halvcirkulära band som appliceras individuellt för stöd vilket ger en mycket bra stabilitet. Justerbara kardborrband upptill och nedtill på ortosen. **INDIKATIONER** Post-Operativt efter knä-operation, ACL eller PCL skador, kollateralligamentsskador och meniskskador.

SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter
LARGE 38-42 centimeter

X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter

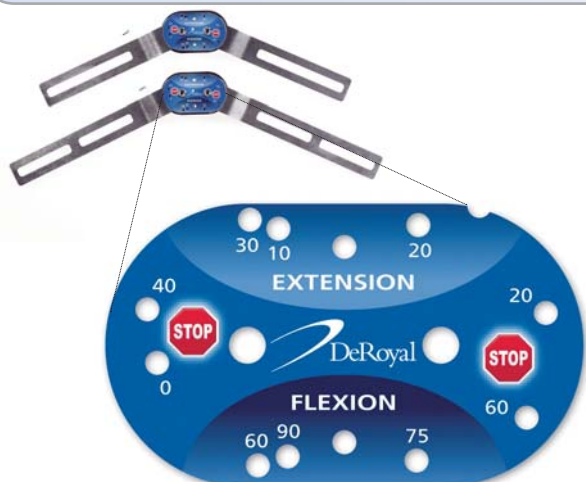

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90
www.mediroyal.se info@mediroyal.se