

MediRoyal Impact



mediroyal 


Living Proof

mediroyal.se

MediRoyal Impact



En normal dag belastas dina fötter med tusentals kilo. Under normala förutsättningar klarar fötterna av detta men vid en skada krävs åtgärder för att snabbt kunna komma tillbaka i aktivitet. MediRoyal Impact är en serie funktionella fotprodukter som kan användas för att stödja, avlasta eller biomekaniskt balansera foten. De olika produkterna är utvecklade för att ge en hög funktion genom dämpning och komfort.

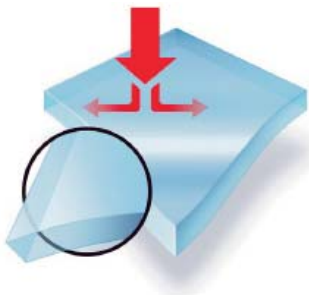


VEP –Viskoelastisk polymer

Är ett gelé-liknade material med hög stöt- och tryckupptagning. Stötvågen från underlaget absorberas av materialet och kan då inte fortplanta sig upp genom foten. Detta leder till avsevärt lägre belastning på fot och underben.

MR1400 Hälsporrekil

Hälsporrekil utvecklad för att avlasta för hälsporre och plantarfasciit. Designad som höger och vänster för att kunna ge en effektivt avlastning medialt. Tillverkade i viscoelastisk polymer som har en lätt häftande yta. Tvätta vid behov med ljummet vatten och mild tvällösning. **INDIKATIONER:** Vid hälsmärta som plantarfasciit, hälsporre eller vid annat behov av avlastning direkt under hälbenet.


MR1400	Hälsporrekil		
Skostorlek	Small	Medium	Large
	35-39	40-42	43-46

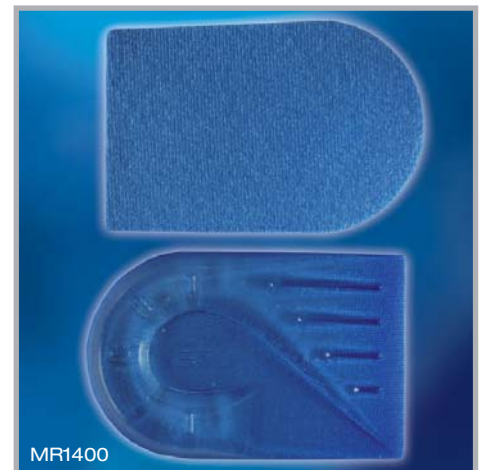

MR1401 Häkil

Häkil speciellt designad för att ge avlastning och stötdämpning. Modellen är något längre än vanliga häkilar för att ge en effektivare avlastning. Tillverkade i viscoelastisk polymer som har en lätt häftande yta. Tvätta vid behov med ljummet vatten och mild tvällösning. **INDIKATIONER:** Achillestendinit, allmän hälsmärta och vid behov av avlastning och extra stötupptagning.

MR1401	Häkil		
Skostorlek	Small	Medium	Large
	35-39	40-42	43-46

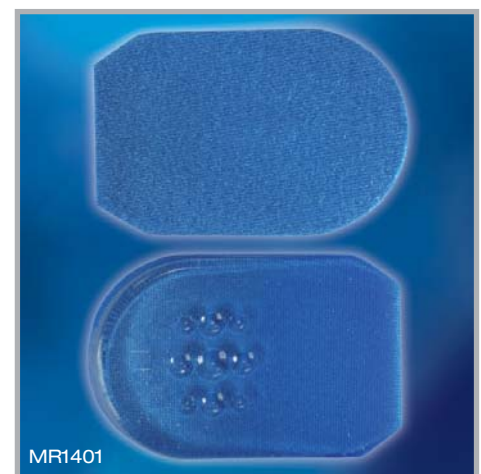

MR1402 Multikil


En häkil som utvecklats för att ge stöd vid problem med hälens fettkudde. Kilen har en högre sarg vilket ger ett effektivt stöd åt fettkudden. Tillverkade i viscoelastisk polymer som har en lätt häftande yta. Tvätta vid behov med ljummet vatten och mild tvällösning. **INDIKATIONER:** Begynnande hälproblem, kollapsad fettkudde.

MR1402	Multikil		
Skostorlek	Small	Medium	Large
	35-39	40-42	43-46



www.mediroyal.se



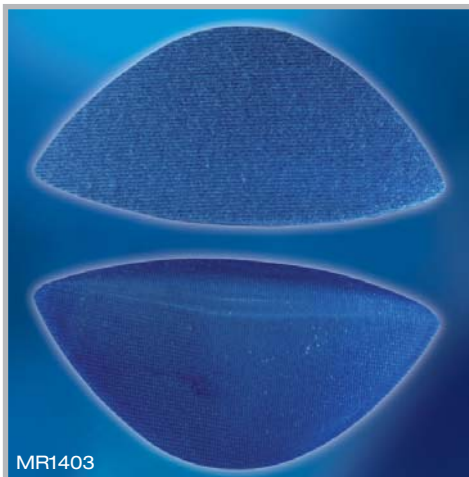

MR 1403 Valvstöd

Ett smidigt valvstöd som ger ett bra stöd för hålfoten. Appliceras direkt i skon och kan flyttas mellan olika par. Tillverkade i viscoelastisk polymer som har en lätt häftande yta. Tvätta vid behov med ljummet vatten och mild tvållösning. **INDIKATIONER:** Höga eller låga fotvalv, smärta över långsgående fotvalvet.

MR1403	Valvstöd			
	Small	Medium	Large	
Skostorlek	35-39	40-42	43-46	



MR1404 T-formad pelott

T-formade pelott tillverkade i viscoelastisk polymer. Den lätt självhäftande ytan gör det enkelt att applicera pelotterna individuellt genom att använda MR1410 Helsula Standard eller MR1411 Helsula Tunn. Pelotterna placeras under sulan. **INDIKATIONER:** Nedsjunkna främre fotvalv, Mortons Syndrom, Hallux Valgus.

MR1404	T-formad pelott			
	Small	Medium	Large	
Skostorlek	35-39	40-42	43-46	



MR 1410 Helsula Standard

Helsula tillverkad av viscoelastisk polymer. Ger en optimal avlastning och stödupptagning över hela foten. Appliceras direkt i skon och kan flyttas mellan olika skor. Sulan har en lätt häftande yta vilket hindrar den från att åka runt i skon. Tvätta vid behov med ljummet vatten och mild tvållösning. Kan enkelt klippas för att anpassas till skon. **INDIKATIONER:** Vid överbelastningsskador i nedre extremitet, benhinneproblem orsakade av låg stödupptagning, post-operativt efter knä- eller höftplastik.

MR1410	Helsula Standard						
Storlek	A	B	C	D	E	F	G
Skostorlek	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-

MR 1411 Helsula Tunn

Helsula med tunnare framfot och tjockare häl. Ger mer plats i skon och bra avlastning och stötupptagning för hela foten. Appliceras direkt i skon och kan flyttas mellan olika par. Sulan har en lätt häftande yta vilket hindrar den från att åka runt i skon. Tvätta vid behov med ljummet vatten och mild tvållösning. Kan enkelt klippas för att anpassas till skon. **INDIKATIONER:** Vid överbelastningsskador i nedre extremitet, benhinneproblem orsakade av låg stötupptagning, post-operativt efter knä- eller höftplastik.

MR1411	Helsula Tunn				
Storlek	A	B	C	D	E
Skostorlek	35-37	37-40	40-43	44-45	46-




MR1411

MR1405 Framfotskil Klädd

Kil som utvecklats för stabilisering av framfoten. Kan placeras medialt eller lateralt. Kilen är fasad och kan på det sättet användas för att ge olika mycket stöd. Genom att mäta in sulan från skon på kilen kan man ge olika mycket stöd. Kilen ska sedan placeras under innersulan i skon och kan användas för både temporär som definitiv korrigering. Säljs parvis. **INDIKATIONER:** Framfotspronation eller supination.

MR1405	Framfotskil Klädd	
Storlek	Small	Large
Skostorlek	35-40	41-46
	Säljs parvis.	

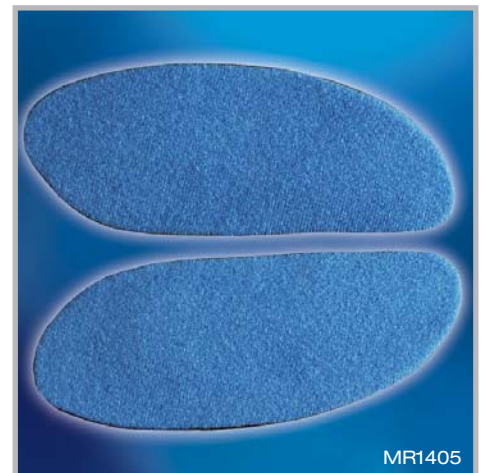

MR1405

MR1406 Framfotskil Transparent

Samma modell som MR 1405 med inte klädd med tyg. Detta gör att kilen kan användas direkt på en spegellåda för att avgöra hur mycket stöd patienten behöver. Kilen placeras antingen medialt eller lateralt. Kilen kan sedan anpassas till skon och läggs under innersulan. Tanken är att kunna testa en temporär korrigering under några dagar till några veckor för att se vilken effekt den ger på patienten. För permanent korrigering, använd MR 1405. Säljs parvis. **INDIKATIONER:** Framfotspronation eller supination.

MR1406	Framfotskil Transparent	
Storlek	Small	Large
Skostorlek	35-40	41-46
	Säljs parvis.	



MR1406



MR1406



MR1407


MR1407 Positioneringskil för Häl, Klädd

Kil som utvecklats för att stabilisera hälen. Kan placeras medialt eller lateralt. Kilen är fasad och kan på det sättet användas för att ge olika mycket stöd. Genom att mäta in sulan från skon på kilen kan man ge olika mycket stöd. Kilen ska sedan placeras under innersulan i skon och kan användas för både temporär som definitiv korrigerig. Säljs parvis. **INDIKATIONER:** Vid behov av medialt eller lateral stöd för hälen.

MR1407 Positioneringskil för Häl, Klädd

Storlek	Small	Large	
Skostorlek	35-40	41-46	

Säljs parvis.

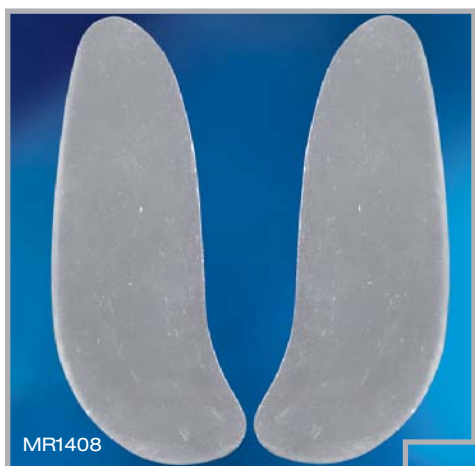

MR1408


MR1408 Positioneringskil för Häl, Transparent

Samma modell som MR 1407 med inte klädd med tyg. Detta gör att kilen kan användas direkt på en spegellåda för att avgöra hur mycket stöd patienten behöver. Kilen placeras antingen medialt eller lateralt. Kilen kan sedan anpassas till skon och läggs under innersulan. Tanken är att kunna testa en temporär korrigerig under några dagar till några veckor för att se vilken effekt den ger på patienten. För permanent korrigerig, använd MR 1407. Säljs parvis. **INDIKATIONER:** Vid behov av medialt eller lateral stöd för hälen.

MR1408 Positioneringskil för Häl, Transparent

Storlek	Small	Large	
Skostorlek	35-40	41-46	

Säljs parvis.

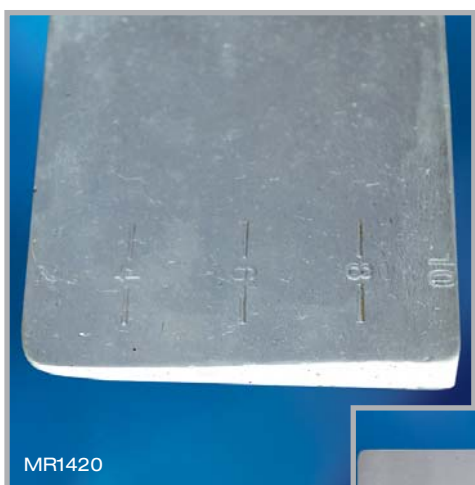

MR1420

MR1420 Helkil för Spegellåda

Ortopedingenjör Lars Eghamn har utvecklat denna kil som går att använda direkt på spegellådan för att avgöra hur varje fot ska stabiliseras individuellt. Kilen är tillverkad av transparent viscoelastisk polymer vilket gör att man kan se fotens belastning igenom. Kilen är graderad från 2 till 10 mm vilket gör det enkelt att avgöra hur mycket stöd foten behöver och framförallt var. Det gör kilen till ett utmärkt hjälpmedel vid utvärdering av patienten på spegellådan. Kilen kan tvättas med alkohol eller desinfektionsmedel.

MR1420 Helkil för Spegellåda

Finns i en storlek, 33x7,5 cm



MR1420



MR1420



MR 1995 Utvärderingskit


Ett komplett utvärderingskit för spegellåda. Innehåller Helkilen för utvärdering samt korrigeringsmöjligheter genom både framfotskilar och positioneringsskilar för hälen. Med hjälp av spegellådan kan man enkelt testa olika lösningar för bästa effekt för patienten. Samtliga produkter kan tvättas med alkohol eller desinfektionsmedel utan att de påverkas. Vid behov av permanent stabilisering eller korrigering, använd MR 1405 Framfotskil Klädd respektive MR 1407 Positioneringsskil för häl Klädd.

Innehåller:

- 1 st MR1420 Helkil för utvärdering
- 1 par MR1406 Framfotskil Transparent Storlek S
- 1 par MR1406 Framfotskil Transparent Storlek L
- 1 par MR1408 Positioneringsskil för Häl Transparent Storlek S
- 1 par MR1408 Positioneringsskil för Häl Transparent Storlek L



PodoBox™

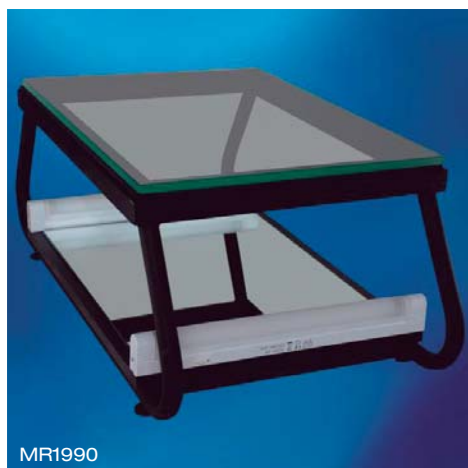

MR1990

MR1990 MediRoyal PodoBox

MediRoyal har tillsammans med Ortopedingenjör Lars Eghamn utvecklat denna kompakta och funktionella spegellåda, PodoBox. Spegellådan är ett utmärkt hjälpmedel vid diagnostisering av besvär från nedre extremitet. Det går enkelt att se belastningen på fotvalven och varus- eller valgusställning av hälen. Med spegellådan kan man också göra enklare statistiska analyser av fotledens belastning. PodoBox är en kompakt spegellåda med mycket låg höjd vilket gör det enkelt för patienter att kliva upp och ned. I botten på lådan sitter spegeln vilket gör det enkelt för både behandlare och patient att se belastningen. Många spegellådor har dålig belysning. Därför har PodoBox två 8W lysrör monterade nedtill för att ge maximal belysning. Glasskivan är tillverkat i 10 mm hårdat glas vilket gör det både hållfast och tåligt mot repor. Undertill har PodoBox ställbara fötter för att kunna kompensera för ojämnt underlag.

MR 1990	PodoBox™		
Höjd:	25 cm		
Vikt:	10 kg		
Längd:	64 cm		
Bredd:	35,5 cm		