


HYDROKOLLATOR

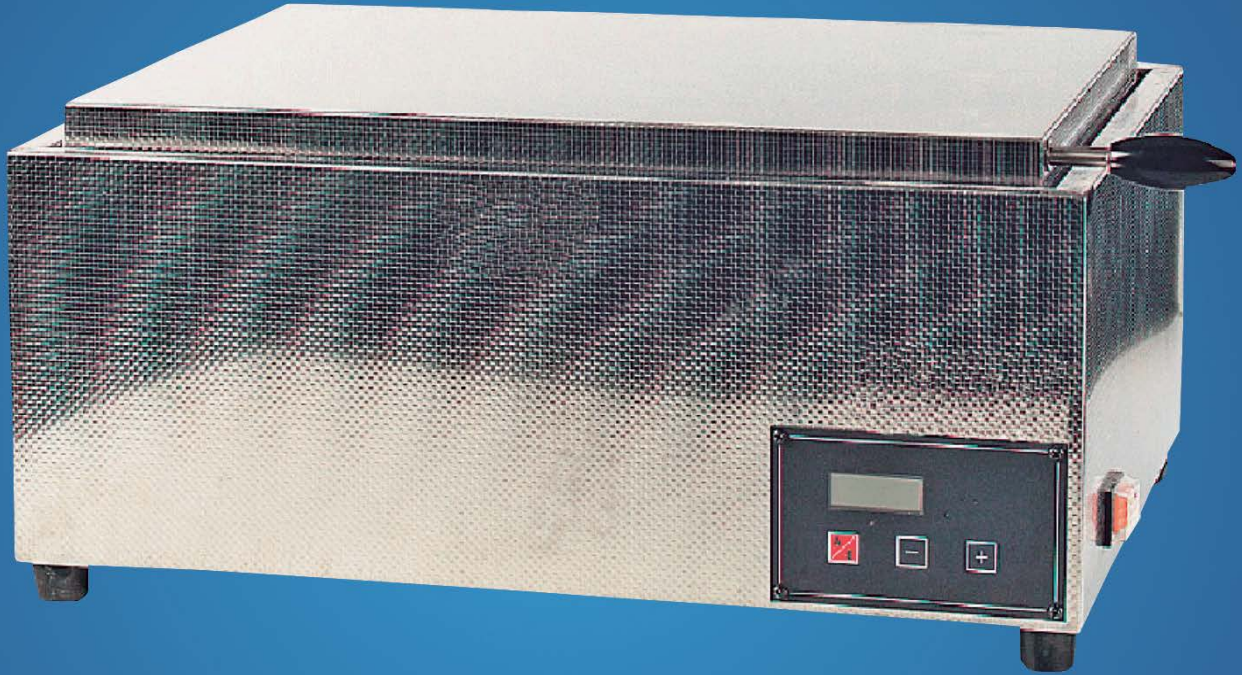

MEDIROYALS HYDROKOLLATOR ÄR TILLVERKAD i rostfritt stål och har ett tättslutande lock som enkelt kan öppnas. Finns i två olika storlekar. Badet är mycket välisolerat vilket gör att det håller värmen bra och minskar energiåtgången. Termostaten är digital och kan ställas in mellan 30-95 grader Celsius, med en grads intervall. Hydrokollatorn levereras med ett bottennät vilket förhindrar att plast bränner fast i botten. Avtappningskran på framsidan för enkel tömning

och rengöring av badet. Jordad stickpropp. Den här hydrokollatorn har genomgått tester enligt EMC 89/336 EEG och är CE-märkt i enlighet med 93/42/EEC.

TEKNISK DATA

- 220V/50Hz/1,8kW
- Temperatur: 30-95 grader Celsius
- En gradintervall
- Tillverkad i rostfritt stål

ST35M2 HYDROKOLLATOR

Innerdimension Längd: 50 cm, Bredd: 35 cm, Djup: 15 cm
Ytter dimension Längd: 50 cm, Bredd: 35 cm, Djup: 15 cm

ST35M1 HYDROKOLLATOR

Innerdimension Längd: 70 cm, Bredd: 36 cm, Djup: 19 cm
Ytter dimension Längd: 77 cm, Bredd: 43 cm, Djup: 34 cm



mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic